


Guía Rápida para el Usuario


Paso 1: Armado del Kit Sanitario

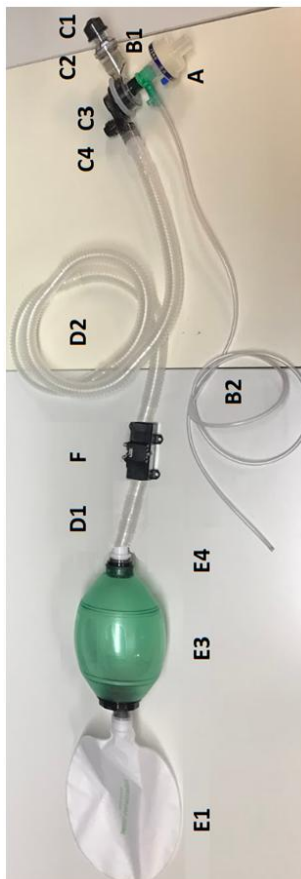

Conjunto	Descripción	Imagen
A	Intercambiador de Humedad con Filtro Bacterial-Viral (HMEF)	
B	(1) Conector Argo (2) Cánula de conexión para medición de presión.	
C	(1) Válvula de PEEP (2) Conector Válvula de PEEP (3) Válvula Unidireccional con Válvula Pop-Off (4) Conector 22-22 Macho	
D	(1) Tubuladura corrugada corta (20cm) (2) Tubuladura corrugada larga (180cm)	
E	(1) Bolsa Reservorio (2) Cánula para toma de O2 (3) Bolsa Autoinflable (4) Conector adaptador 22mm	
F	Sensor de Flujo Honeywell (Forma parte del Equipo ya que está fijo a uno de los laterales)	

Paso 2: Encendido de Equipo, ubicación Resucitador y conexionado

- 2.1: Conectar el dispositivo a 220VAC
- 2.2: Abra la tapa y gire la perilla hasta la posición encendido
- 2.3: Conectar la manguera de bolsa reservorio (E3) a la toma de O2
- 2.4: Conectar sensor de presión con manguera 6mm. ⚠

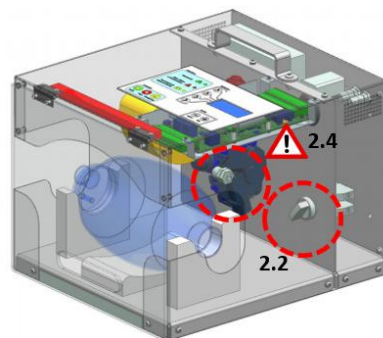

Nota: Indicadores

Indicadores




Indica que el equipo se encuentra en estado CICLANDO

**Indica la presencia de una o varias alarmas activas.
Ver Display para mayor detalle.**

Indica que el sistema se encuentra operando con la Batería Interna de Backup. Verificar alimentación de equipo.

Paso 3: Configurar Parámetros

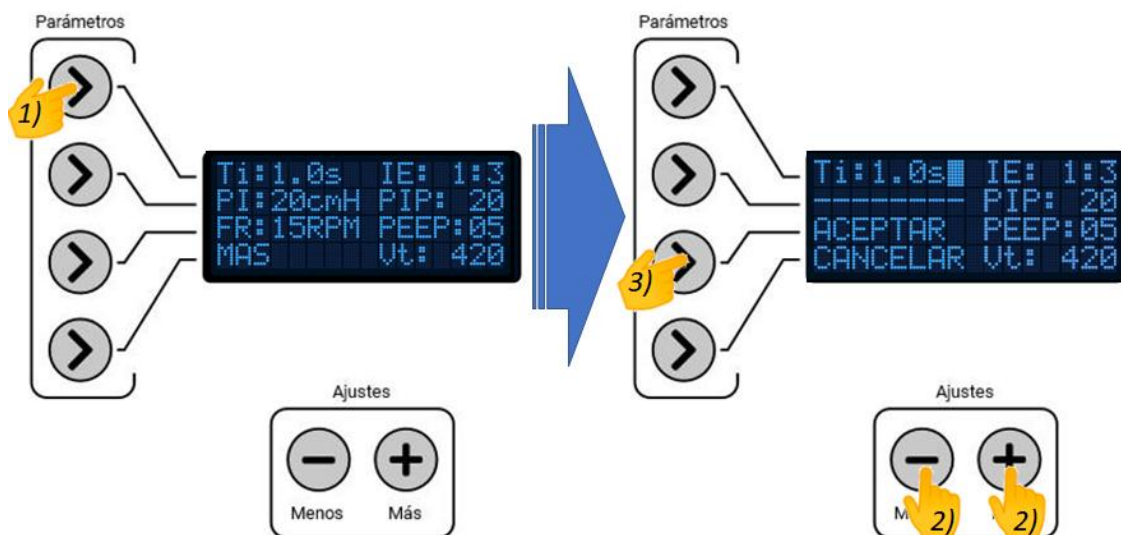

3.1: Seleccione el “Parámetro” a configurar (Ti, PI o FR).

3.2: Setear el valor deseado con las teclas de “Ajustes” (“-” y “+”).

3.3: ACEPTAR o CANCELAR.

Iniciar: Una vez seteados los parámetros presione la tecla “Iniciar”

Parar: Para la detención del ciclado presione la tecla “Parar”, luego confirme el mensaje “Parar Ventilado”, presione CONFIRMAR o CANCELAR (ver punto 3.3)

Paso 4: Configurar Alarmas




4.1: Seleccione el Parámetro “MAS”, y luego seleccione la opción “Ajuste Alarmas”.

4.2: Seleccione el tipo de alarma a modificar.

4.3: Setear el valor deseado con las teclas de “Ajustes” (“-” y “+”).

4.4: Siga presionando “MAS” para recorrer toda la lista de alarmas y luego volver.

Paso 5: Manejo de Alarmas

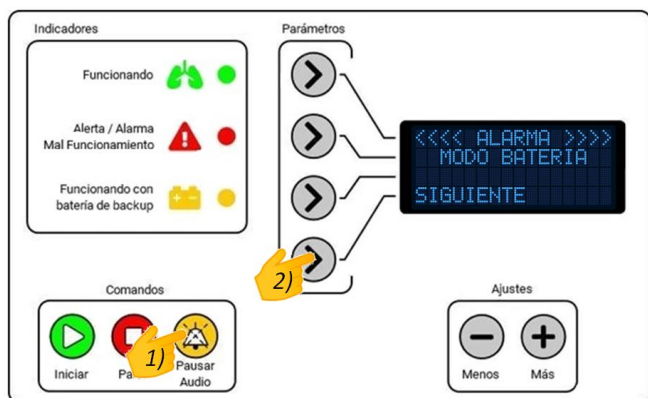

5.1 Presionando “Pausar Audio” el sonido de la alarma auditiva se pausa 2 minutos.

5.2 Presionando “Siguiente” se recorre la lista de alarmas activas y ordenadas según su criticidad.

5.3 Al finalizar aparecerá la leyenda “Volver” que le permitirá volver al Menú Principal para tomar las medidas de solución de alarma.